



Smith+Nephew

Средства перевязочные
Повязка пленочная

IV3000[◇]

Влагонепроницаемая
с полосками
для фиксации и
контрольной биркой

СТЕРИЛЬНОЕ



Для одноразового использования. Стерилизована окисью этилена.

Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F). Беречь от солнечных лучей.

Описание

IV3000 – это влагонепроницаемая прозрачная пленочная повязка, разработанная на основе паронепроницаемой прозрачной пленки Smith&Nephew REACTIC°, специально предназначенная для фиксации катетера и защиты места внутривенного введения.

Механизм действия


IV3000 изготовлена пленки REACTIC°, обладающей высокой воздухопроницаемостью и высокой проницаемостью для паров воды. Пленка защищает место внутривенного введения от загрязнений из внешней среды, обеспечивая физический барьер для жидкостей, твердых частиц и микробов.

IV3000 покрыта низкоаллергенным клеящим веществом. Повязка также снабжена стерильными фиксирующими полосками и контрольными бирками.

Инструкция по применению

Очистите и тщательно высушите область наложения в соответствии со стандартными процедурами.

1. Снимите фиксирующие полоски с печатной бумажной подложки (1) и наложите соответствующим образом, убедившись, что полоски не закрывают место введения. Полоски могут использоваться на крыльях или основании катетера для повышения безопасности, а также для закрепления трубок или стабилизации просветов катетера. Снимите подложку (1) с повязки.
2. Снимите защитную бумагу (2) в направлении, указанном на схеме.
3. Наложите повязку с катетером, плотно установленным в отверстие повязки.
4. Приклейте часть повязки с клейкой пленкой на катетер, создавая минимум складок.
5. Снимите прозрачную печатную подложку (3), подняв неклеящий язычок в конце повязки и потянув его диагонально до полного удаления подложки.
6. Удалите оставшуюся бумажную за-

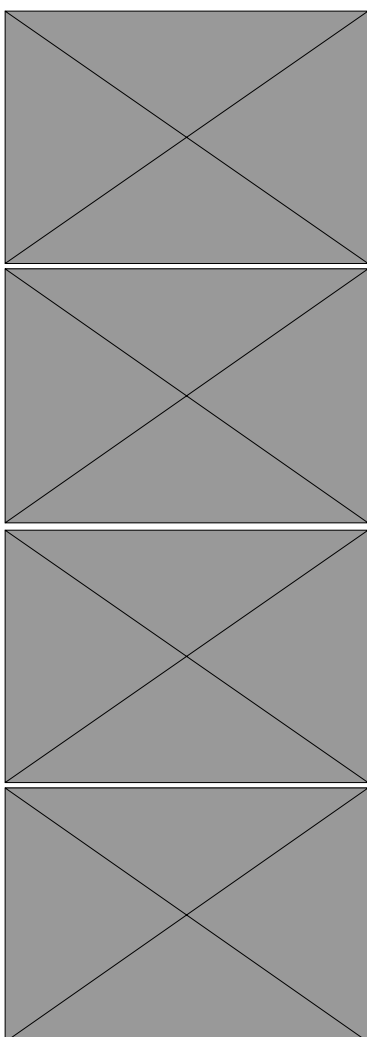

щиту (4) и приклейте тканевые части повязки на крылья катетера.

7. Расположите пленку вокруг катетера, чтобы завершить наложение повязки.
8. В соответствии с местными клиническими протоколами информация может быть записана шариковой ручкой на контрольной бирке перед снятием с подложки (1) и помещением в записи пациента, на кожу или на повязку (не закрывая обзор места установки катетера).
9. При использовании более чем одной повязки не допускайте перекрывания повязок.
10. Снимайте повязку, сняв тканевую часть повязки, а затем освободив пленку, растягивая ее параллельно коже пациента и одновременно удерживая кожу пациента и катетер другой рукой. Также можно использовать спирт, чтобы разрушить клеящий слой. В случае особенно чувствительной кожи для нарушения адгезии можно использовать теплую воду и мыло, а затем осторожно снять повязку

Показания

Вышеуказанный продукт подходит для фиксации катетеров с портом.

Противопоказания

Повязка IV3000 должна использоваться только в местах внутривенного введения. Если требуется пленочная повязка для открытых ран, таких как пролежни, ожоги или донорские участки, следует использовать OPSITE° FLEXIGRID°. Фиксирующие полоски и контрольная бирка не предназначены для использования в качестве замены швов и других первичных методов закрытия ран.

Меры предосторожности

Используйте только на подготовленной сухой коже. Не накладывайте повязки друг на друга и не допускайте перекрывания повязок. Периодически проверяйте место повязки и катетера, чтобы удостовериться, что фиксация является надежной и вливание происходит непрерывно и надлежащим образом, в особенности после принятия ванны или душа или намочения места повязки и катетера. Если повязка отсоединится, убедитесь, что катетер установлен правильно, а затем наложите новую повязку. Как и в случае других клеящихся изделий, накладывайте и снимайте осторожно, чтобы не допустить повреждения чувствительной или слабой кожи. В случае покраснения или повышения чувствительности прекратите использование. IV3000 – это продукт для одноразового использования. В случае использования более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция. При открытии упаковки нарушается стерильная защита, соответственно, неиспользованные повязки не должны сохраняться для будущего использования.

Доступность продукта

Код	Размер	Показание	Доступность	С отверстием
4007	6 см x 7 см / 2 3/8 дюйма x 2 3/4 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Нет
4008	10 см x 12 см / 4 дюйма x 4 3/4 дюйма	Центральные катетеры	Коробка 50 шт.	Нет
66004005	10 см x 12 см / 4 дюйма x 4 3/4 дюйма	Центральные катетеры	Коробка 10 шт.	Нет

Другие доступные продукты IV3000

Код	Размер	Показание	Доступность	С отверстием
66004011	5 см x 6 см / 2 дюйма x 2 3/8 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Да
4006	7 см x 9 см / 2 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Да
66004009	9 см x 12 см / 3 1/2 дюйма x 4 3/4 дюйма	Периферийные и центральные катетеры	Коробка 50 шт.	Да
66800512	11 см x 14 см / 4 5/16 дюйма x 5 1/2 дюйма	Устанавливаемые периферийно центральные катетеры	Коробка 25 шт.	Да

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
° Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 02/2015 www.smith-nephew.com

**УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ:**

ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1 Тел:
+7 (495) 755-55-03